

أهلاً بكم

تهانينا! أنت الآن المالك الفخور لواحد من أكثر منتجات تنقية الهواء تطور وفعالية المتوفرة. يساعدك منظف الهواء Defender® علي تخفيض الكثير من الملوثات المسببة للمشاكل ومواد الحساسية العالقة في الهواء المنزلي.

عند عمل منظف الهواء Defender® مع منظف السطوح Majestic® فإنه يوفر لك ولعائلتك أنقي هواء ممكن.

شركة Health-Mor تركز نفسها لخدمة الزبائن ونحن نفتخر بجودة منتجاتنا. إن كان لديكم أي سؤال أو ملاحظات أو احتجتهم إلى قطع صيانة فيرجي الاتصال بالموزع المحلي لمنتجات FilterQueen® أو بالرقم 1-440-846-7800 لمعرفة الوكيل في منطقتكم.

يرجي قضاء بعض الوقت لقراءة كافة أقسام هذا الدليل والتأقلم مع منتج Defender®. نرجو أن تتمتعوا بسنوات طويلة من الهواء النقي الصافي الذي سيوفره لكم.

هذا الجهاز ليس لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

ملاحظة: تم تصنيع كافة وحدات Defender® المعدة للتصدير من مواد مطابقة لتلك المصنوع منها المحلية، وهي مصنفة بأنها جهاز طبي من الدرجة الثانية حسب وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أداء المنتجات المصدرة هو نفسه للمنتجات المحلية.

جدول المحتويات

21	معلومات هامة للسلامة
21	المواصفات التقنية
22	وصف القطع
23	تعليمات التشغيل
23-24	تعليمات البرمجة
25-26	تبديل الفلتر
27	دليل استكشاف المشكلات وإصلاحها
28	الضمان

معلومات هامة للسلامة

عند استخدام جهاز كهربائي، يجب اتباع الاحتياطات المبينة بما فيها التالي:

اقرأ كافة التعليمات هذه قبل استخدام جهاز **FilterQueen® Defender®**

تحذير: لتخفيض احتمال الحرائق أو الصعقة الكهربائية أو الأذى:

- لا تستخدم الجهاز في الأماكن المكشوفة أو فوق أسطح ميلولة.
- لا تستخدمه مع سلك كهرباء أو مقيس تالف. إن كان الشريط تالفًا فيجب تبديله من قبل المصنع أو موزع منتجات **FilterQueen®** المرخص.
- يجب أداء الصيانة من قبل موزع منتجات **FilterQueen®** المرخص فقط.
- يجب ألا يتم استخدام **Defender®** من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو الأفراد الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو الذين تتقصم الخبرة والمعرفة دون إشراف أو توجيه بشأن استخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد يتسبب فيها.
- ينبغي ألا يلعب الأطفال بـ **Defender®**.
- يجب ألا يتم التنظيف أو الصيانة بواسطة الأطفال من دون إشراف.

التصنيف:

طراز **220-240 فولت 50 هرتز 65 واط** □

D11G/GS/GE/UK//AU/HK

طراز **220 فولت 60 هرتز 75 واط** □

D11K/PH

72.3 ديسبيل في السرعة العالية

اقرأ هذه التعليمات واحتفظ بها

المواصفات التقنية

خرطوش **Medi-Filter®**

- وسيط من الزجاج الصوفي المشكل بالطريقة الرطبة. أحادي الطبقة، غير متشابك به 250 ثانية ذات قياس 1.6 بوصة (4.13 سم) تجمع لتغطي مساحة ذات قياس 43.9 قدم مربع (4.08 متر مربع)

فلتر **Enviropure®** الفحمي (ميزة إضافية)

- فلتر كربون نشط، صمم لتخفيض الغازات والروائح
- وسيط امتصاص غاز عالي الفعالية.

التركيب

- الجسم: بلاستيك صلب عالي المقاومة للصدمات
- الشبكة: بلاستيك صلب عالي المقاومة للصدمات.

الضمان

- انظر الضمان لمزيد من التفاصيل


وصف القطع

يعتبر جهاز Defender® جهاز تنقية الهواء الداخلي وغايته تقليل الجزيئات الملوثة حتى الصغيرة جداً منها لغاية 0.1 ميكرون بالقياس، بما في ذلك الغبار، الدخان، عث الغبار، ملوثات عث الغبار، ملوثات الصراصير، البكتيريا، العفن، وملوثات الحيوانات الأليفة التي يمكن لها أن تؤدي إلى عدوى حساسية. كما يمكن لجهاز Defender® أن يُستخدم لتقليل دخان السجائر والروائح المنزلية الأخرى. ينصح بالاستخدام في غرفة أبعادها القصوى 4.6 × 6.1 م بارتفاع أقصاه 2.5 مترًا. وقد يؤثر فتح الأبواب والنوافذ على مدى فعالية الجهاز.

- 1 قبضة الحمل – يمكنك من نقل جهاز Defender® بسهولة إلى أية غرفة في المنزل.
- 2 مفتاح التشغيل والإطفاء – يحتوي الرمز الدولي التشغيل والإطفاء.
- 3 لوحة التحكم – تسمح للمستخدم بتعديل وظائف الجهاز حسب الطلب.
- 4 مخرج الهواء النظيف – يرتفع مخرج الهواء فوق السجاد لتقليل احتمالية التلوث للهواء الداخلي.
- 5 الموتور – موتور بدون فرشاة صمم للخدمة الطويلة.
- 6 خرطوشة® Medi-Filter – تقلل الجزيئات مثل غبار العفن وما شابه من الهواء في المنزل.
- 7 فلتر® Enviropure الفحامي – ميزة (إضافية) مصنوع من الكربون المنشط لتقليل الروائح.
- 8 مدخل الهواء – يدخل الهواء إلى الجهاز من كافة الزوايا للتوزيع المثالي.
- 9 صمولة حازجة – فكها للتبديل السريع للفلتر.



لوحة التحكم

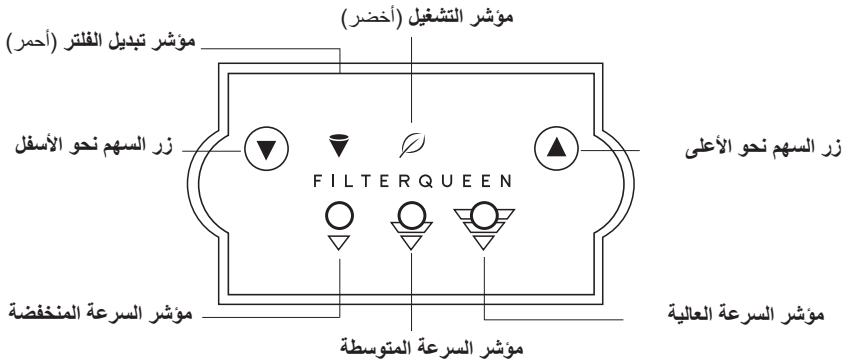

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل:

- 1 أصل الجهاز بمقبس التيار (سيتهج المؤشر الأخضر الموجود على مفتاح التشغيل والإطفاء دلالة على أن الجهاز يعمل)
- 2 اضغط مفتاح التشغيل والإطفاء ليصبح في وضعية التشغيل ا . عند التشغيل المبدي للجهاز ستتهج كافة الأضواء على لوحة التحكم لمدة ثانيتين، ويتهج مؤشر التشغيل الأخضر (بشكل ورقة نبات) ويبقى متوهجاً طالما بقي الجهاز في وضعية التشغيل ا .
- 3 سيبدأ الجهاز بالعمل على السرعة البطيئة (المؤشر البطيء مضيء)
- 4 يمكن الآن استخدام الأسهم المؤشرة نحو الأعلى والأسفل التي تقع على اللوحة الأمامية لضبط السرعة كما يلي:
السهم المؤشر نحو الأسفل: اضغط لتخفيف سرعة الموتور (لن تتغير سرعة الموتور إن كان يعمل في أقل سرعة)
السهم المؤشر نحو الأعلى: اضغط لزيادة سرعة الموتور (لن تتغير سرعة الموتور إن كان يعمل عند أقصى سرعة).

تحذير !

- تفاعل العطور السائلة والرشاشة وزبوت العلاج العطرية أو أي هيدروكربونات عطرية أخرى مع جهاز Defender® يمكن أن يسبب تلفاً في الغلاف البلاستيك المقوى (ABS). وقد يؤدي التلف في هذا الغلاف إلى كشف بعض الأجزاء المتحركة.
- للحد من خطر إصابات التعرض للأجزاء المتحركة، لا تستخدم الجهاز مع العطور السائلة أو الرشاشة أو مع زبوت العلاج العطرية أو أي هيدروكربونات عطرية أخرى.
- استخدام هذه المواد سيبتل الضمان الخاص بك.

تعليمات البرمجة:

يسمح لك نمط البرمجة بتنشيط برنامج عمل متواصل على مدار الساعة.

لتنشيط نمط البرمجة:

- 1 أطفئ الجهاز.
- 2 اضغط السهم المؤشر نحو الأسفل وأبقه مضغوطاً عليه أثناء تشغيل الجهاز.
- 3 بعد أن يبدأ المؤشر الأخضر الخاص بالسرعة العالية في الوميض، حرر زر السهم لأسفل. الوحدة الآن في وضع البرنامج. اتبع الإرشادات التالية لضبط تسلسل البرامج المطلوب.

لتحديد برنامج مرغوب:

يجب ضبط سرعة الموتور باثني عشر تزياداً متوالياً قدر الواحد ساعتين للحصول على تشغيل قدره 24 ساعة.

برمجة زمن بداية التشغيل: ستبدأ دورة التشغيل بتزايد قدره ساعتين بعد برمجة الفترة الثانية عشر من البرنامج. يرجى مراعاة وقت بداية البرنامج عند التخطيط لبدء زمن البرنامج. (إذا كان المؤشر على التوقيت 2 بعد الظهور، تبدأ هنا الزيادة الأولى.)

- 1 خطط زمن البدء بالاستعانة بالجدول المبين في الصفحة 24.
- 2 اختر سرعة الموتور المرغوبة لساعتي التشغيل الأوليين بواسطة الضغط على زر السهم المؤشر نحو الأسفل (السرعة العالية مختارة الآن، اضغط زر السهم المؤشر نحو الأسفل مرة واحدة لاختيار سرعة متوسطة ومرتين لاختيار سرعة بطيئة وثلاث مرات لإطفاء الموتور)
- 3 بمجرد اختيارك لسرعة الموتور للساعتين الأولتين اضغط زر السهم المؤشر نحو الأعلى لحفظ السرعة المطلوبة، (بعد أقل اختيار السرعة لكل ساعتين سيتهج مؤشر تبديل الفلتر بشكل متقطع).
- 4 استمر بتحديد سرعة كل مدة إضافية بواسطة الضغط على زر السهم المؤشر نحو الأسفل وقلل السرعة لكل خيار. ثم اضغط زر السهم المؤشر نحو الأعلى.

تعليمات التشغيل

جدول تسلسل البرامج: ع = عالي م = متوسط خ = منخفض ط = مطفاً

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	الفترة المتزايدة كل ساعتين
ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	السرعة المختارة للموتور (ضع علامة حول الاختيار)
م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	
خ	خ	خ	خ	خ	خ	خ	خ	خ	خ	خ	خ	
ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ط	
												الوقت

لإتمام برنامج التشغيل لمدة 24 ساعة، يجب الضغط على زر سهم المؤشر المتجه لأعلى 12 مرة. وعند إدخال الفترة المتزايدة الأخيرة يبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً. وعندما يعمل الجهاز في وضع البرنامج سيومض مؤشر اختيار السرعة المحددة. وإن تم برمجة الجهاز ليكون متوقفاً فستومض كافة المؤشرات.

لتنفيذ البرنامج:

- سيبدأ تشغيل البرنامج بشكل تلقائي بعد إدخال الفترة الزمنية المتزايدة بمقدار ساعتين
- يستمر تشغيل هذا البرنامج لمدة 24 ساعة حتى يتم إيقافه

لتخطي البرنامج:

- يمكنك تخطي البرنامج بشكل مؤقت بواسطة الضغط على زر السهم المؤشر نحو الأعلى أو الأسفل أثناء تشغيل الجهاز.
- سيعمل الجهاز عند السرعة الجديدة المختارة للمدة المتبقية من الفترة التي تقدر بساعتين إضافة إلى الفترة التي تليها لمدة ساعتين آخرين (حتى 4 ساعات قبل العودة إلى وضع البرمجة).

لإلغاء البرنامج:

- أطفئ الجهاز. سيتم إلغاء البرنامج بشكل دائم.

ملاحظة: يسمح تصميم جهاز Defender® بتوزيع الهواء بزوايا 360 درجة، ولذلك فمن المفضل وضعه بمسافة 3 أقدام بعيداً عن الجدار أو المفروشات.

جدول استبدال الفلتر

تذكر أنه من الضروري تبديل الفلتر بشكل دوري للحصول على أفضل خدمة لجهاز Defender®.

- مرة كل 6 أشهر قم بتبديل فلتر Enviropure® الفحامي (ميزة إضافية)
- بدل فلتر Medi-Filter® مرة كل سنة (انظر قسم مؤشر تبديل الفلتر صفحة 22)

تنبيه: افصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل الخدمة. لا تغسل أو تحاول تنظيف الفلترات بأية طريقة. ينصح التبديل الدوري.

تبديل الفلتر

مؤشر استبدال الفلتر:

جهاز® Defender مزود بمؤشر استبدال الفلتر في اللوحة الأمامية. إذا ومض هذا المؤشر الأحمر في أي وقت ننصحك بالإتصال بموزع® FilterQueen المعتمد لتطلب فلترًا جديدًا. إذا انقطع وميض هذا المؤشر الأحمر وظل ضوؤه ثابتًا فيصبح باستبدال الفلتر. للانتفاع بفوائد جهاز® Defender الموجود لديك على أكمل وجه طوال فترة الضمان الذي لديك، ننصحك بشدة أن تتبع جدول استبدال الفلتر المقترح أعلاه. وفي حالة ارتفاع معدلات التلوث ستحتاج لاستبدال الفلترات بمعدل أسرع.

يعتمد عمل مؤشر استبدال الفلتر على مدة استعمال الفلتر ويتحكم فيه عداد وقت داخل الجهاز. بعد 11 شهراً من استخدام مخزن فلترات خرطوش® Medi-Filter سيبدأ مؤشر استبدال الفلتر بالوميض. وسيظل وميض المؤشر حتى تبلغ المخزن 12 شهراً من الاستخدام وعندئذ يكف المؤشر عن الوميض ويظل ضوؤه ثابتًا.

بعد استبدال مخزن خرطوش® Medi-Filter يجب عليك إعادة ضبط عداد وقت مؤشر استبدال الفلتر إلى وضعه الأول. سينطفئ المؤشر عند إعادة ضبط عداد الوقت بطريقة صحيحة.

إعادة ضبط عداد وقت مؤشر استبدال الفلتر:

بعد استبدال مخزن خرطوش® Medi-Filter حسب التعليمات الموجودة في صفحة (26) يمكن إعادة ضبط عداد وقت مؤشر استبدال الفلتر بتنفيذ سلسلة الخطوات التالية:


- 1 وصل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي.
 - 2 اضغط مفتاح التشغيل On/Off لتضعه في وضع ("1") On.
 - 3 اترك الجهاز ليبدأ التشغيل بسرعة بطيئة.
 - 4 اضغط واستمر في الضغط على زر السهم الأعلى UP والسهم الأسفل Down معاً حتى يبدأ مؤشر استبدال الفلتر في الوميض.
 - 5 حرر زر السهم الأعلى والسهم الأسفل.
 - 6 في خلال 5 ثوان، اضغط مع الاستمرار على كل من زر السهم لأعلى ولأسفل (Up and Down) مرة أخرى.
 - 7 حرر كلا الزرين عندما يتحول المؤشر الأحمر من الوميض البطيء إلى الوميض السريع.
- إذا إتبعنا هذه الخطوات بطريقة صحيحة، فسيفلطف مؤشر استبدال الفلتر ولن يعود إلى الوميض ثانيه لمدة 11 شهراً. أما إذا ظل مؤشر استبدال الفلتر مضيقاً، فعليك إعادة هذه الخطوات مرة أخرى.
- لاحظ أن في خطوة رقم 6 أعلاه، مؤشر استبدال الفلتر يجب أن يكون في حالة وميض عند الضغط على السهمين في المرة الثانية.
- ملاحظة: في حالة ارتفاع مستويات التلوث، يحتاج الفلتر للتبديل المستمر.
- ملاحظة: لطلب المزيد من الفلاتر، اتصل بالموزع المحلي لمنتجات® FilterQueen أو اتصل بالهاتف 1-440-846-7800 لتحديد الموزع القريب منك.

تبدیل الفلتر

التغيير السريع للفلتر في الأوقات الملائمة سيساعد علي تفادي الضرر بجهاز Defender® الحاصل من استمرار التشغيل مع وجود فلتر مسدود.

لاستبدال الفلتر:


- ❶ بعد فصل التيار عن الجهاز Defender® علي جانبه وفك الصمولة الحاجزة من الجهاز بواسطة إدارتها بعكس حركة عقارب الساعة.

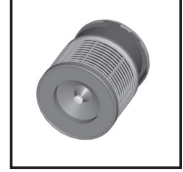


- ❷ أعد الجهاز إلي الوضعية الصحيحة وافصل أعلى مجموعة الموتور.



- ❸ افصل خرطوش Medi-Filter® وفلتر Enviropure® الفحمي. وإن كنت ستقوم باستبدال فلتر Enviropure® الفحمي فاستخرج فقط الفلتر القديم من خرطوش Medi-Filter® وتخلص منه.
ملاحظة: الفلتر الفحمي مثبت بالفيلكرو.

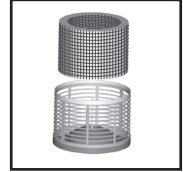


- ❹ ضع فلتر Enviropure® الجديد حول مخزن خرطوش Medi-Filter® من الخارج ثم ثبته بالفيلكرو المرفق. وإن كنت تبديل فلتر Medi-Filter® فثبت الفلتر الكربوني الجديد إلى خرطوش Medi-Filter® ثم أعد الاثنين إلى الجهاز.

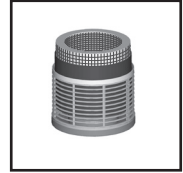

- ❺ أعد تركيب مجموعة الموتور.



- ❻ ضع الجهاز علي جانبه وثبت الصمولة الحاجزة عند أسفل الجهاز. أعد الجهاز إلي وضعه الصحيح لاستمرار الاستخدام.

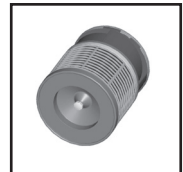

دليل استكشاف المشكلات وإصلاحها

الحالة	السبب المحتمل	الإجراء التصحيحي
مؤشر أخضر في وضع التشغيل/ لن يومض مفتاح الطاقة في وضع إيقاف التشغيل	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي	<ul style="list-style-type: none"> تحقق أن الجهاز موصول بالتيار. تحقق من وصول التيار الكهربائي إلى المقبس. تحقق من عدم تلف أسلاك الجهاز. يلزم إجراء أعمال الصيانة بالجهاز.
المؤشر الأخضر لوضعية التشغيل (الرقاقة) على اللوحة الأمامية لا يضيء	التيار الكهربائي لا يصل إلى لوحة التحكم، أو يوجد عيب في هذه اللوحة	<ul style="list-style-type: none"> تحقق أن مفتاح التيار في وضعية التشغيل. تأكد أن المؤشر الأخضر عند مفتاح التشغيل متوهج. يلزم إجراء أعمال الصيانة بالجهاز.
مؤشر استبدال الفلتر الأحمر في وضع وميض	حان وقت طلب فلتر جديدة.	<ul style="list-style-type: none"> راجع تعليمات تبديل الفلتر في الصفحة 25.
مؤشر استبدال الفلتر الأحمر مضيء	حان وقت استبدال الفلتر إعادة ضبط عداد الوقت	<ul style="list-style-type: none"> هذا ظرف تشغيل طبيعي، انظر تعليمات استبدال الفلتر في صفحتي 24-26.
كافة مؤشرات سرعة الموتور تومض والجهاز لا يعمل	الجهاز ينفذ برنامج محدد وهو الآن في وضعية إيقاف التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> هذا نمط تشغيل عادي. راجع تعليمات البرمجة في الصفحة 23.
مؤشرات سرعة الموتور لا تومض والجهاز لا يعمل	الجهاز يعمل في وضعية تحضير البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> هذا نمط تشغيل عادي. راجع تعليمات البرمجة في الصفحة 23 اضغط زر السهم لأسفل Down مرة واحدة لتختار السرعة العالية.
مؤشر سرعة يومض والجهاز يعمل	الجهاز يعمل في وضعية البرمجة وهو الآن في وضعية السرعة المبينة بالمؤشر	<ul style="list-style-type: none"> هذا نمط تشغيل عادي. راجع تعليمات البرمجة في الصفحة 23.
مؤشر سرعة يومض والجهاز لا يعمل	الجهاز يعمل في وضعية البرمجة	<ul style="list-style-type: none"> هذا نمط تشغيل عادي. راجع تعليمات التشغيل في الصفحة 23.

الضمان

تضمن شركة Health-Mor خلو جهاز تنقية هواء الغرفة® Defender من العيوب في المواد والصناعة لمدة عامين من تاريخ الشراء. ويمكن للمشتري الأصلي لجهاز تنقية هواء الغرفة® Defender أن يمد هذا الضمان لعام آخر من خلال شراء Cartridge Medi-Filter® سنويًا. ولكي يمتد ضمان Defender® لعام إضافي، يجب على المشتري أن يملأ بطاقة تمديد الضمان المرفقة بعلبة Cartridge Medi-Filter® ثم إعادتها.

هذا الضمان لا يغطي: (1) استخدام جهاز Defender® للأغراض التجارية أو المؤسسية أو المهنية أو بغرض التآجير أو في أي عرض آخر غير الأغراض المنزلية؛ (2) التلف الحاصل نتيجة لسوء الاستخدام أو الجهل؛ (3) التلف الحاصل نتيجة لاستخدام مصدر طاقة كهربية ذو جهد كهربى مخالف للجهد الكهربى المذكور على لوحة بيانات الجهاز؛ (4) التلف الحاصل نتيجة إجراء أعمال الصيانة بواسطة أشخاص غير تابعين لشركة Health-Mor أو أي من موزعيها المعتمدين؛ و(5) تكلفة النقل أو التفريغ أو التسليم أو المكالمات المنزلية أو المكالمات الخاصة بالخدمة؛ (6) الفلاتر.

سنتولى شركة Health-Mor إصلاح أو استبدال أي جزء معيب أو تلف بمقتضى هذا الضمان بغرض أن جهاز Defender® أو الجزء المعيب قد تم إرجاعه، مع دفع مقابل النقل مقدمًا، مرفقا به الدليل الخاص بتاريخ الشراء، إلى الموزع المعتمد الذي تم شراء الجهاز منه أو إرساله العنوان Quality Assurance Department، Health-Mor، 1 American Road، Suite 1250، Brooklyn، Ohio 44144 USA، أو بواسطة تصديق مكتوب من شركة Health-Mor إلى أي شخص مصرح له بإجراء أعمال الخدمة بمقتضى الضمان. يمكن الحصول على أي معلومات تتعلق بالأشخاص الآخرين المعتمدين من خلال الشركة لإجراء أعمال الصيانة، وذلك من خلال الكتابة إلى «قسم علاقات المستهلكين Consumer Relations Department بشركة Health-Mor على العنوان السابق، أو من خلال الاتصال برقم 1-440-846-7800. وفي حالة التأكد من تلف جهاز Defender® أو أي من أجزائه من خلال الفحص لمواده أو لتصنيعه، يتم إصلاحه أو استبداله حسب اختيار شركة Health-Mor وإرجاعه إلى المرسل إما من خلال الشحن أو بالبريد. لن يتم دفع أي تعويض مقابل استبدال الأجزاء المعيبة أو أعمال الخدمة التي يتم القيام بها خلال فترة الضمان في حالة تنفيذها من خلال أي شخص آخر غير الموزع المعتمد الذي تم شراء جهاز Defender® منه أو من شركة Health-Mor ذاتها، بدون الحصول على اعتماد مكتوب من شركة Health-Mor.

لا يسري هذا الضمان، بل ويعد لاغياً إذا لم تتحقق الشروط التالية: (1) شراء جهاز Defender® من موزع معتمد أو من شركة Health-Mor؛ (2) عدم تغيير الرقم المسلسل لجهاز Defender® الذي وضعه المصنع أو إتلافه أو إزالته؛ (3) استخدام جهاز Defender® وفقاً للإرشادات الواردة في دليل الإرشادات، مع عدم إساءة استخدامه؛ (4) استخدام فلاتر® FilterQueen و/أو الأجزاء الأصلية في جهاز Defender®.

أي إصلاح أو استبدال لجزء تالف أو معيب بمقتضى هذا الضمان سيتم توفير ضمان له لمدة عام أو حتى نهاية فترة الضمان الأصلية، أيهما أطول.

لا يوجد ضمان آخر واضح مستخدم مع جهاز Defender®.

لا تفترض شركة Health-Mor أو تصرح لأي شخص بأي مسؤولية إضافية. إبطال أي من حدود هذا الضمان لا يؤثر على سريان باقي الحدود.

الاسترداد وإعادة التدوير وفقاً لـ WEEE

يُطالب التوجيه الخاص بدول الاتحاد الأوروبي المتعلق بالمعدات الكهربائية والإلكترونية المستهلكة، منتجي المكناس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء التي تُباع في دول الاتحاد الأوروبي بما يلي:

- ① ضع ملصق على المكناس وأجهزة تنقية الهواء لكي تُعلم المستهلك بأن هذه المنتجات قابلة لإعادة التدوير.
- ② احرص على استرداد المكناس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء من المستهلك عندما تنتهي مدة صلاحيتها،
- ③ ووفر التمويل اللازم لإعادة التدوير والاستخدام.

يسري توجيه WEEE في 13 أغسطس من عام 2012، ويجب على المصنعين تلبية الأهداف المحددة لإعادة التدوير بحلول شهر فبراير من عام 2014.

بيان التوافق مع WEEE

من خلال الموزع المعتمد التابع لنا، تتولى شركة Health-Mor استرداد المكناس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء لإعادة تدويرها وفقاً لمتطلبات إعادة التدوير الخاصة بكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي وذلك في نهاية العمر الافتراضي للمنتج.

